



Panneau de contrôle

Réglage de l'irrigation

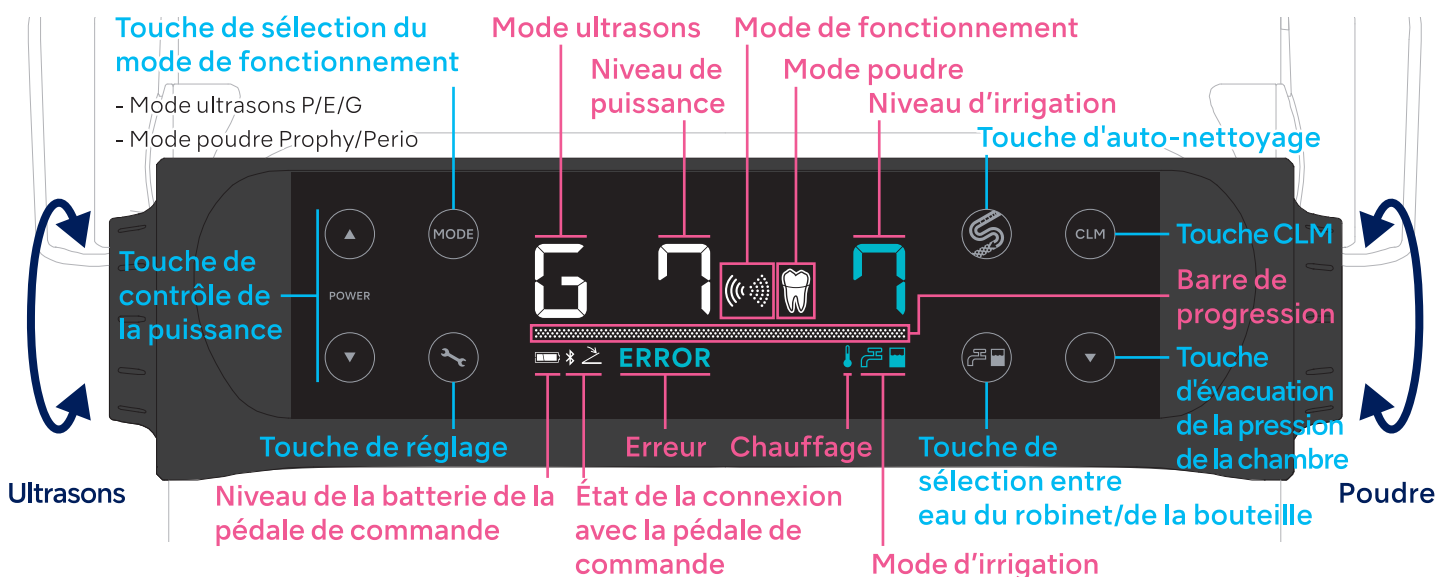


Pédale de commande

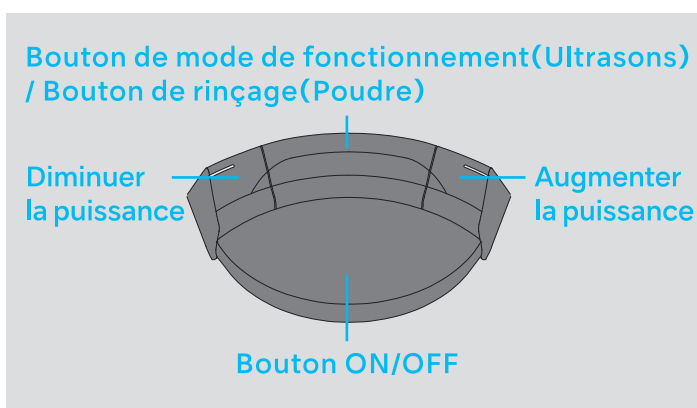

Utilisation du mode ultrasons


- 1 Prenez la pièce à main à ultrasons.
- 2 Sélectionnez le mode ultrasons (P/E/G).
- 3 Réglez le niveau de puissance.
- 4 Sélectionnez la méthode d'irrigation.
- 5 Réglez le niveau d'irrigation.
- 6 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

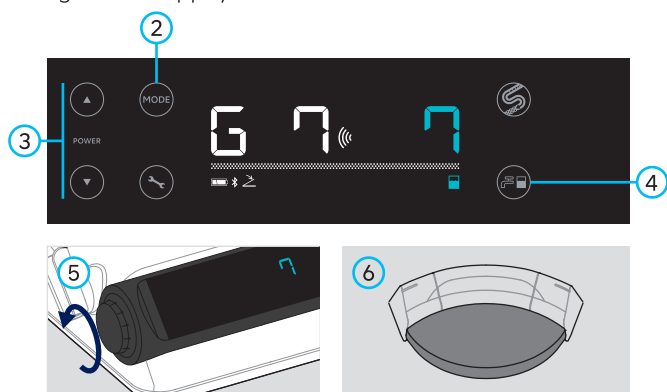

Utilisation du mode poudre

Mode	Chambre	Pièce à main	Embout	Utilisation	Poudre
		NSK Prophy/Perio		3-5 mm 10-60°	
		NSK Prophy/Perio		3-10 mm 30-90°	
		NSK Prophy/Perio		3-10 mm 30-90°	
		NSK Prophy/Perio		3-10 mm 30-90°	


- 1 Prenez la pièce à main à poudre.
- 2 Sélectionnez le mode poudre (Prophy / Perio).
- 3 Réglez le niveau de puissance.
- 4 Réglez le niveau d'irrigation.
- 5 Appuyez sur le bouton ON/OFF.

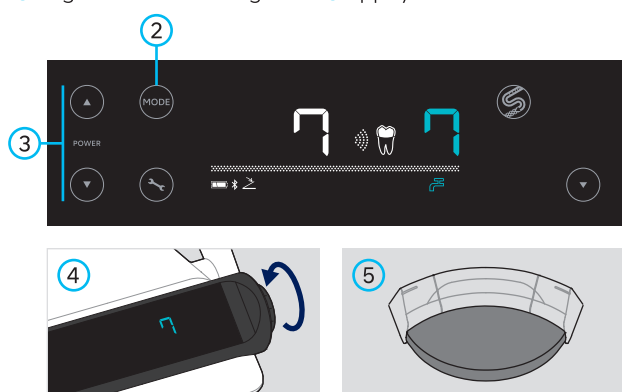


	Fréquence d'exécution des modes d'auto-nettoyage	Utilisation courante du Varios Combi Pro2			W (Ultrasons) : Élimination de l'eau W (Poudre) : Élimination de l'eau et de la poudre de purge P : Élimination de l'eau du tuyau de la pièce à main Élimination des poudres du circuit des poudres Libération de la pression de la chambre D : Élimination de l'eau du cordon/tuyau de la pièce à main Élimination des poudres du circuit des poudres Libération de la pression de la chambre
		Ultrasons et Poudre	Poudre uniquement	Ultrasons uniquement	
Mode d'auto-nettoyage à activer	Après chaque traitement	W(poudre)	W(poudre)	—	
	Une fois par jour (Après dernier traitement)	D	P	W (ultrasons)	



Réglez le niveau d'irrigation sur 10. Touchez pendant trois secondes, jusqu'à ce que « AC » s'affiche.

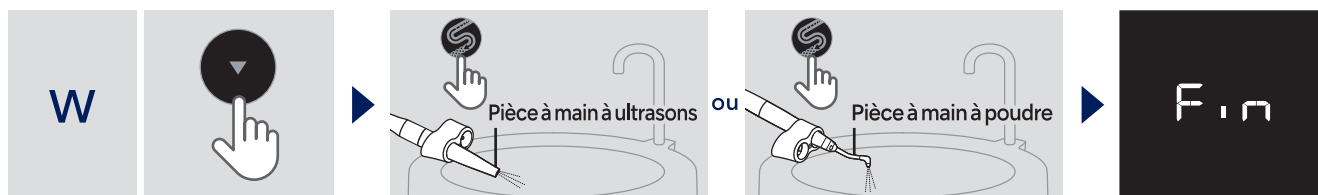


Sélectionnez « W ». Insérez la pièce à main avec le cordon ou le tuyau dans le support CLM. Touchez . Après l'affichage de « Fin », touchez .

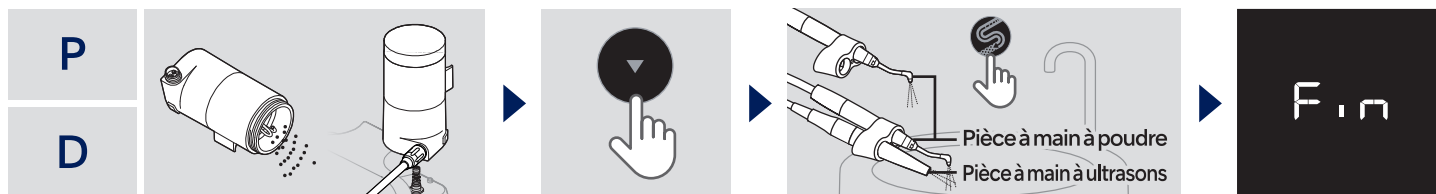


Jetez la poudre et fixez la chambre.	Sélectionnez « D » ou « P ».	Insérez les pièces à main avec le cordon /tuyau dans le support CLM. Touchez .	Après l'affichage de
			« Fin », touchez .

Décontamination/prévention de la formation de biofilms(Mode CLM)

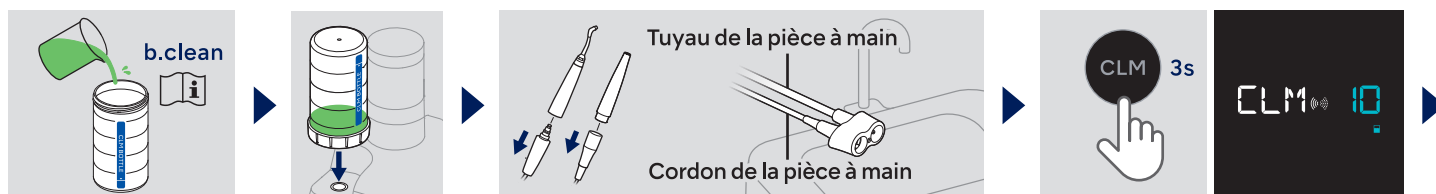

Remplissez le flacon CLM de b.clean (non dilué). Insérez la bouteille CLM. Retirez le cordon/tuyau de chaque pièce à main et insérez-le dans le support CLM. Touchez pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran ci-dessus s'affiche.

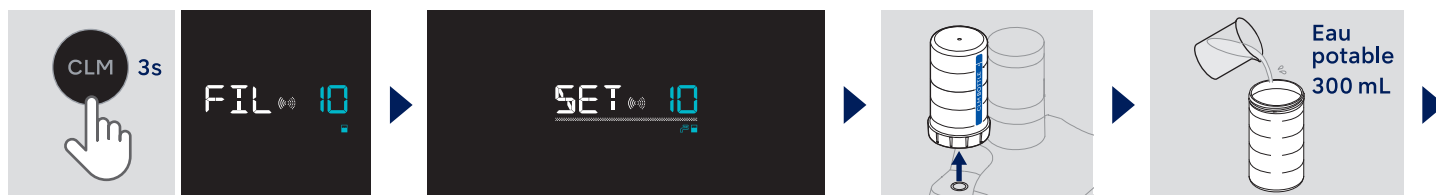

Touchez  pendant trois secondes, jusqu'à ce que le mode CLM démarre.	Après l'affichage de l'écran ci-dessus, éteignez l'appareil et attendez 12 heures ou plus.	Mettez l'appareil sous tension. Retirez la bouteille CLM.	Remplissez la bouteille d'irrigation désinfecté avec de l'eau potable.
---	--	---	--



Insérez la bouteille d'irrigation. Touchez  pendant trois secondes, jusqu'à ce que la vidange commence. Le mode CLM est terminé lorsque l'écran ci-dessus s'affiche. Touchez  pour revenir à l'affichage normal.